

# Báscula inteligente WiFi

## Instrucciones



**zoom**  
informática

Avda Gutierrez Mellado 250  
30500 Molina de Segura -Murcia  
ventas@zoominformatica.com  
644 276 223

### Funciones

- 1) Máximo Peso 180Kg . Divisiones 0.1Kg
- 2) Auto apagado y encendido
- 3)Permite medir: Peso, BMI, Grasa, contenido de agua, músculo, calorías, masa visceral, proteínas, contenido huesos, forma de los huesos, edad,..
- 4) Gran precisión gracias a su CPU de altas prestaciones para un correcto peso
- 5) Aviso por baja batería

El peso se encenderá cuando detecte un peso de 5Kg o superior sobre la báscula. Tras iniciar el mínimo peso reconocido será 3kg

#### Baterías:

Instala 1 batería AAA antes de utilizar el peso e instala el peso en una superficie rígida y estable

### Manejo

#### A) Para medir el peso

Si no tienes conexión WiFi, sitúate sobre el peso y solo reconocerá tu peso, para ello:

- 1: Utiliza el peso sobre una superficie estable y no situes ningún producto entre el peso y la persona



- 2)Con cuidado ponte encima del peso sin moverte hasta que aparezca el peso en el led
- 3)La báscula se apagará automáticamente al bajarte y no realizar operaciones

B: Conéctate con WiFi a la báscula para poder tener mayor información

### Descargar APP

Busca y descarga la APP **"Smart Life"** desde Google Play Store o APP Store para instalar la aplicación en tu teléfono móvil


La primera vez que accedas, necesitarás hacer un registro



### Registro

Si no tienes una cuenta creada tendrás que reistrarte la primera vez que accedas

- 1.Clic en registrar y acepta las condiciones de privacidad para continuar con el registro

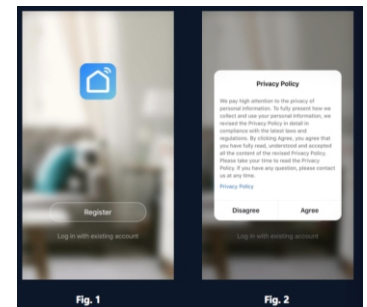


- 2.El sistema detectará automáticamente tu país o región, o de lo contrario puedes introducirla manualmente. Introduce tu teléfono o email para hacer el registro y obtener el código de identificación
3. Introduce este código recibido para completar el proceso de registro

### Acceso a la APP

Una vez tienes una cuenta en la APP podrás acceder en la aplicación

### Conectar báscula con APP

- 1.Instala la batería en la báscula y haz una pulsación larga en el botón trasero hasta que aparezca en la pantalla 0 0 parpadeando
- 2.Abre la APP y pulsa en la parte central para añadir un dispositivo. Selecciona el botón +. Selecciona "Dispositivo portátil para..." y "Escala de grasa corporal WiFi"

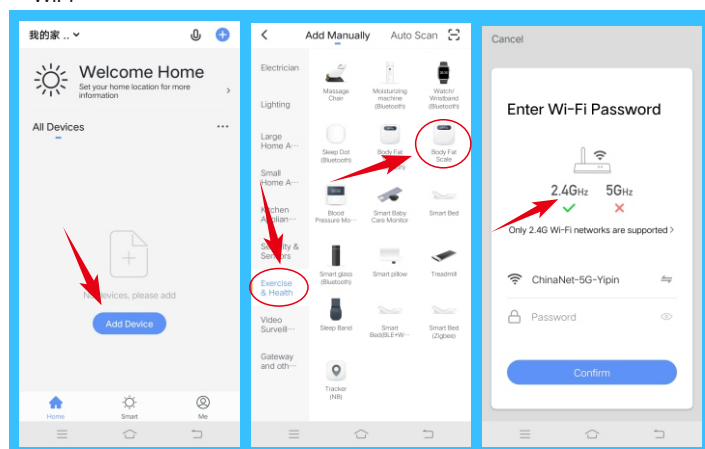


- 3.Selecciona tu red WiFi 2.4Ghz e introduce la contraseña de acceso

**Nota:** Ten en cuenta solo es compatible con redes WiFi 2.4Ghz


### Creación de un usuario

- 1.Tras conectar la báscula podrás introducir datos personales como nombre, sexo, fecha de nacimiento, altura,..

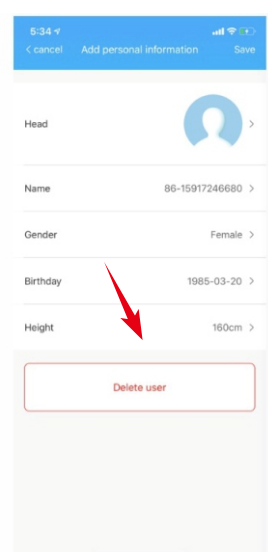

- 1.Pon la báscula en una superficie plana y estable
- 2.Ponte con cuidado sobre la plataforma hasta que el peso aparezca reflejado en la pantalla

- 4.En la APP observarás datos como la masa corporal y otra información personalizada

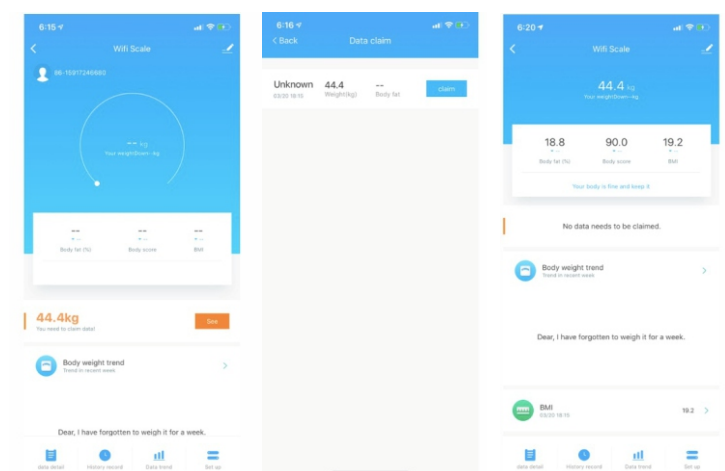

### Notas

- 1)Al subirte a la báscula quítate los zapatos y calcetines para obtener toda la información posible
- 2) Cambia las baterías si es necesario
- 3)Limpia con un paño seco con alcohol o limpiador de cristales si la superficie está sucia. No utilices otros productos químicos
- 4)La báscula es un producto de alta precisión. No saltes o des fuertes golpes sobre la báscula ni intentes dearmarla para evitar daños físicos
- 5)La báscula está diseñada para uso personal, no profesional. Los datos que aparecen son solo de referencia y pueden no ser exactos
- 6)Nunca subas a las báscula con los pies mojados